

Kangaroo™ Gravity EnPlus

Zestaw ostrza z portem do podawania leków

Zestaw ostrza z portem do podawania leków

Kangaroo Gravity EnPlus umożliwia podawanie mieszanin żywieniowych, płynów oraz leków u pacjentów z prawidłowo funkcjonującym układem pokarmowym, którzy z przyczyn fizycznych nie są w stanie przyjmować pożywienia i/lub płynów przez normalne żucie i połykanie.

Znajdujące się na końcu zgłębnika złącze żywieniowe ENFit® umożliwia prawidłowe podłączenie zgłębnika do żywienia dojelitowego zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.


Informacje o produkcie

Kod zamówienia	Opis	Wielkość opakowania
777901	Zestaw ostrza Kangaroo™ Gravity EnPlus z portem do podawania leków	30

- Przeznaczony do dojelitowego podawania mieszanin żywieniowych, płynów i leków u pacjentów z prawidłowo funkcjonującym układem pokarmowym, którzy z przyczyn fizycznych nie są w stanie przyjmować pożywienia i/lub płynów przez normalne żucie i połykanie
- Zgłębnik z niewielkim otworem
- Wchodzące w skład zestawu złącze ENFit® spełnia wymogi określone w normach konstrukcyjnych ISO 80369-3, dzięki czemu ogranicza ryzyko nieprawidłowego podłączenia zgłębnika dojelitowego i poprawia bezpieczeństwo pacjenta
- Regulowany zacisk rolkowy do kontrolowania prędkości przepływu mieszaniny żywieniowej
- Nie zawiera DEHP
- Przeznaczony wyłącznie do podłączania mieszanin oraz zgłębników do żywienia dojelitowego
- Produkt jednorazowego użytku; używać przez maksymalnie 24 godziny
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie: 30 zestawów w opakowaniu



Ostrze EnPlus z komorą kroplową
Umożliwia grawitacyjne podawanie mieszanin żywieniowych, płynów, i/lub leków.

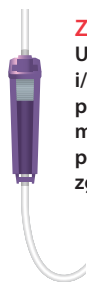

Zacisk rolkowy
Umożliwia zatrzymanie i/lub kontrolowanie prędkości przepływu mieszaniny żywieniowej, płynów lub leków przez zgłębnik.



Port do podawania leków ze złączem ENFit®
Zapewnia bezpieczne podłączenie zgłębnika do żywienia dojelitowego oraz eliminuje ryzyko nieprawidłowego podłączenia do innych złączy z otworami o małej średnicy.



Męskie złącze Y z nakrętką z żeńskim gwintem ENFit®

Do użytku wyłącznie przez personel medyczny. Ważne informacje: przed użyciem należy zapoznać się z dołączonymi do produktu instrukcjami zawierającymi wskazania i przeciwwskazania do stosowania, działania niepożądane, sugerowaną procedurę, ostrzeżenia i przestrogi. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego udoskonalania swoich produktów, firma Cardinal Health zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępności produktu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Cardinal Health. © 2019 Cardinal Health. Wszelkie prawa zastrzeżone. CARDINAL HEALTH, LOGO Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE, ENFIT i KANGAROO są znakami towarowymi firmy Cardinal Health, które mogą być zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli. 2GM19-1000343-03 08/2019



CardinalHealth

Essential to care™