


Dlaczego wybrać opatrunek nieprzylegający TELFA?

- TELFA jest opatrunkiem nieprzylegającym z perforowanym filmem z poliestru, zawierający gęstą warstwę absorbującą z nietkanej bawełny, do stosowania w przypadku różnych rodzajów ran
- Opatrunek TELFA ma powierzchnie nieprzylegającą o gładkich (wypalonych) krawędziach otworów perforacji, by usuwanie opatrunku było bezbolesne i bez naruszania rany
- Opatrunek TELFA ma optymalną wielkość otworów, umożliwiającą wypływ wysięków, ale niepozwalającą by tkanki przylegały do opatrunku
- Opatrunek TELFA nie przywiera do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip)
- Opatrunek TELFA wspomaga zapobieganie infekcji ran


OPATRUNEK TELFA I OPATRUNKI KONKURENCYJNE POD MIKROSKOPEM

Poniżej można zobaczyć lepsze otwory opatrunku TELFA w porównaniu z produktami innych producentów.

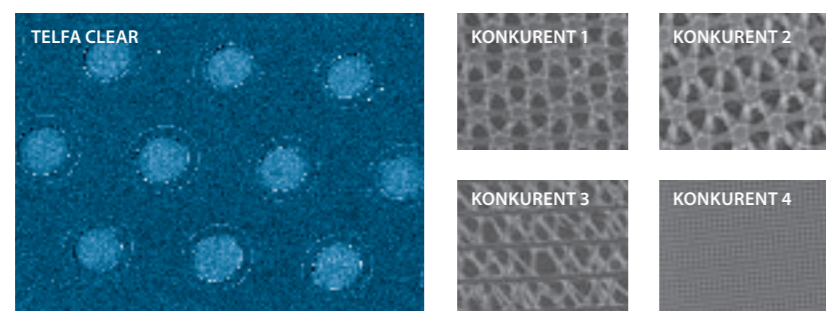

PORÓWNANIE PRZYLEGANIA POMIĘDZY OPATRUNKAMI SUCHYMI NIEPRZYLEGAJĄCYMI

W tym teście przyleganie zostało zmierzone jako wielkość siły potrzebnej by usunąć opatrunek z paska wątroby wołowej długości około pięciu centymetrów.

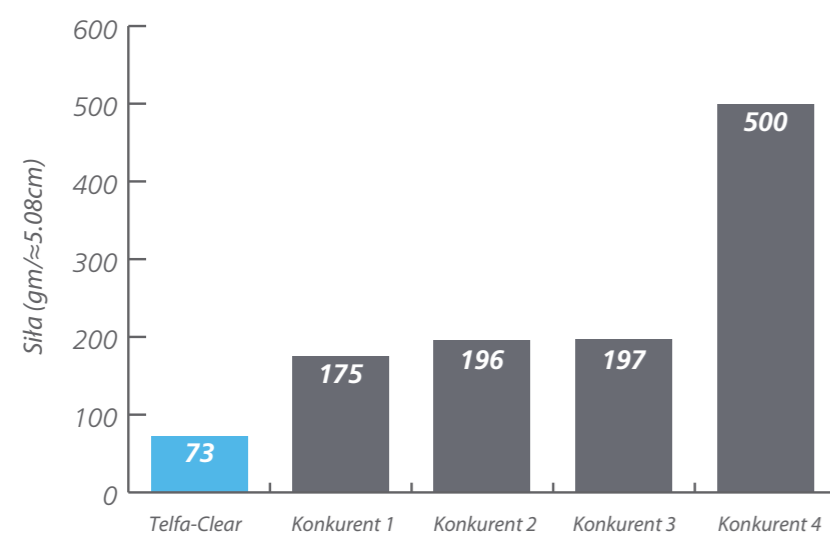

Source:-Quigg, J. Gilbert, J & Reil, L 1994

“Podsumowując, wydaje się, że Telfa Clear ma wszystkie zalety droższych opatrunków o niskim stopniu przylegania takich jak Mepitel lub Silicone NA, mając równocześnie cenę przynajmniej dwukrotnie niższą.”

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

KOD	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W KARTONIE
TELFA CLEAR			
1109	7,5cm x 7,5cm	25	50
1111	10cm x 12,5cm	25	50
1113	30cm x 30cm	25	50
1114	30cm x 60cm	25	50
1115	99cm x 22,8cm rolka	1	4 rolki
TELFA DRESSINGS			
1055	5cm x 7,5cm	100	1200
1065	7,5cm x 10cm	100	1200
1075	7,5cm x 15cm	100	1200
1085	7,5cm x 20cm	100	1200
TELFA ISLAND			
7539LF	5cm x 10cm (wielkość poduszeczki 3cm x 4,7cm)	50	400
7550	10cm x 10cm (wielkość poduszeczki 5cm x 5cm)	25	200
7540	10cm x 12,5cm (wielkość poduszeczki 5cm x 7,5cm)	25	200
7541	10cm x 20cm (wielkość poduszeczki 5cm x 15cm)	25	100
7542	10cm x 25,5cm (wielkość poduszeczki 5cm x 20cm)	25	100
7544	10cm x 35cm (wielkość poduszeczki 5cm x 30cm)	25	50
7551	15cm x 15cm (wielkość poduszeczki 10cm x 10cm)	25	100
TELFA MAX			
1171	10cm x 15cm	10	50
1172	15cm x 22,8cm	5	25
1173	22,8cm x 38cm	1	30
1174	38cm x 45,7cm	1	30
1175	38cm x 60,9cm	1	30
VIASORB™			
8884472641	5cm x 7,6cm (wielkość poduszeczki 2,5cm x 2,5cm)	20	100
8884472401	10cm x 15cm (wielkość poduszeczki 5cm x 10cm)	20	100
8884472500	17,7cm x 17,7cm (wielkość poduszeczki 10cm x 10cm)	20	100
8884472005	15cm x 25cm (wielkość poduszeczki 7,6cm x 17,7cm)	20	100
8884472104	7,6cm x 25cm (wielkość poduszeczki 2,5cm x 20cm)	20	100

COVIDIEN, COVIDIEN z logotypem i pozostałe marki oznaczone TM są znakiem towarowym COVIDIEN AG lub filii. © Covidien AG lub filii. Wszystkie prawa zastrzeżone. TY0548

(*) WEBRIL jest znakiem towarowym BBA Nonwovens Simpsonville, Inc., używany pod licencją

(**) SONTARA jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours & Co.

1. J. Edwards, Journal of Community Nursing, May 2002.

 **COVIDIEN**

WWW.COVIDIEN.COM

TELFA™
Opatrunek nieprzylegający

 **COVIDIEN**

Rodzina opatrunków TELFA

TELFA CLEAR

- Nieprzylegający perforowany film z poliestru

TELFA DRESSINGS

- Nieprzylegający perforowany film z poliestru oraz poduszczką chłonną

TELFA ISLAND

- Nieprzylegający perforowany film z poliestru oraz poduszcзка z przylepną krawędzią


TELFA MAX

- Nieprzylegający perforowany film z poliestru z ultra-chłonną poduszczką z bawełny.

VIASORB™ (OPATRUNEK WYSPOWY TELFA Z FILMEM NIEPRZEPUSZCZALNYM)

- Nieprzylegający perforowany film z poliestru oraz poduszcзка z przylepną krawędzią
- Zewnętrzny film wodoodporny

TELFA Clear

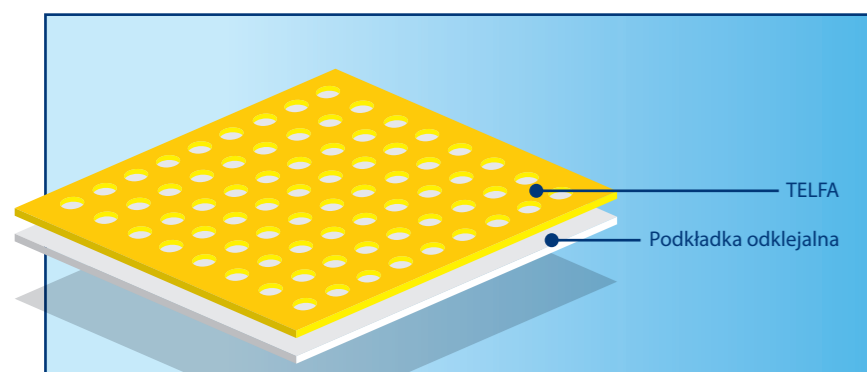

NIEPRZYLEGAJĄCY PERFOROWANY FILM Z POLIESTRU NA PAPIEROWEJ PODKŁADCE ODKLEJANEJ

NIEPRZYLEGAJĄCY	Zezwala na wzrost nowej tkanki nie zakłócając procesu gojenia. Umożliwia bezbolesne usunięcie. Nie przylega do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip).
NIEWCHŁANIAJĄCY	Gdy jest stosowany w kombinacji z odpowiednim dodatkowym opatrunkiem można go stosować na ranach słabo, umiarkowanie lub mocno sączących.
PRZEŹROCZYSTY	Umożliwia kontrolę rany bez zakłócania procesu gojenia. Może pozostać w miejscu przez kilka dni.
UNIWERSALNY	Dostępny w wielu dogodnych wielkościach. Można go stosować w przypadku różnych rodzajów ran.
MOŻNA GO CIĄĆ	Pozwala na dostosowanie do wielkości rany.


SPOSOBY STOSOWANIA



ZASTOSOWANIE

- Oparzenia
- Przeszczepy skóry
- Miejsca pobierania
- Abrazje
- Cięcia chirurgiczne
- Rany przewlekłe


TELFA Opatrunki

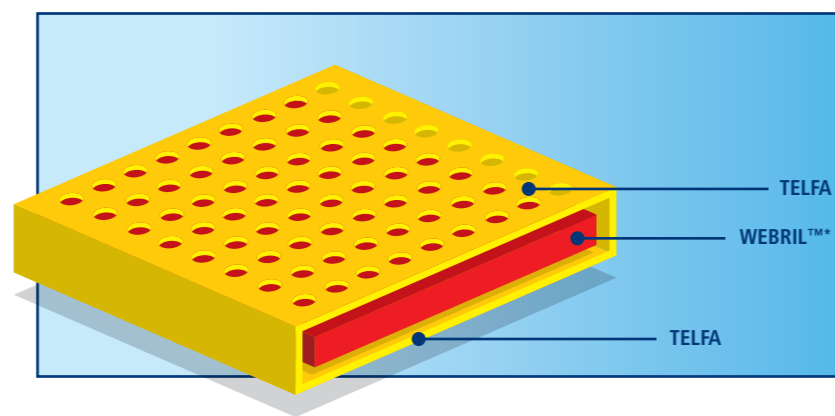

TELFA FILM PO OBU STRONACH WARSTWY CHŁONNEJ WEBRIL NA PODSTAWIE BAWELNY

NIEPRZYLEGAJĄCY	Zezwala na wzrost nowej tkanki nie zakłócając procesu gojenia. Umożliwia bezbolesne usunięcie. Nie przywiera do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip).
WARSTWA CHŁONNA	Bawełniana warstwa środkowa umożliwia umiarkowane wchłanianie nadmiaru cieczy z rany
UNIWERSALNY	Dostępny w wielu dogodnych wielkościach. Można go stosować w przypadku różnych rodzajów ran.

TELFA Island

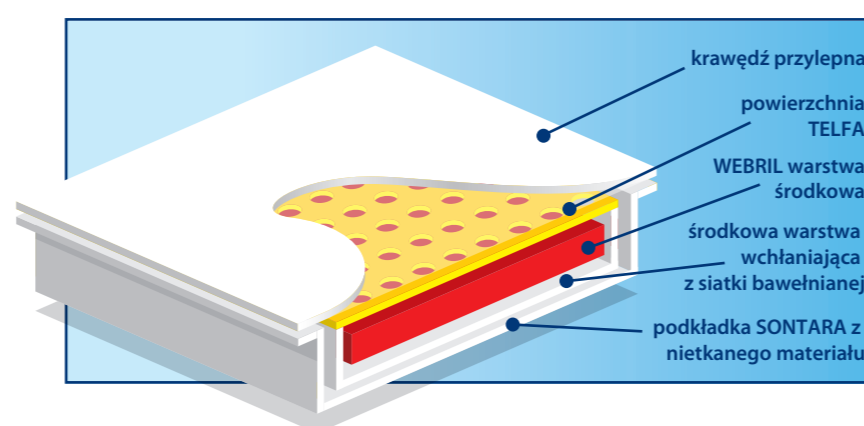

NIEPRZYLEGAJĄCY	Zezwala na wzrost nowej tkanki nie zakłócając procesu gojenia. Umożliwia bezbolesne usunięcie. Nie przywiera do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip).
WARSTWA CHŁONNA	Bawełniana warstwa środkowa umożliwia umiarkowane wchłanianie nadmiaru cieczy z miejsca rany
WET-PRUF™ BARIERA	Nieperforowana TELFA zabezpiecza przed przebijaniem cieczy na powierzchnię oraz przed penetracją cieczy z zewnątrz.
MIEKKA PODKŁADKA SONTARA™ Z NIETKANEGO MATERIAŁU	Dobrze się układa; wygodny (materiał z którego produkowane są chusteczki dla niemowląt i do twarzy)
KRAWĘDŹ PRZYLEPNA	Niema potrzeby stosowania dodatkowych opatrunków do przymocowania. Oszczędza czas pielęgniarcom, przylega do drenu, kateteru itp.
UNIWERSALNY	Dostępny w wielu dogodnych wielkościach. Można go stosować w przypadku różnych rodzajów ran.



ZASTOSOWANIE


- Opatrunek podstawowy do ran lekko sączących
- Oparzenia
- Przeszczepy skóry
- Miejsca pobierania
- Abrazje
- Cięcia chirurgiczne
- Rany przewlekłe



ZASTOSOWANIE


- Miejsca infuzji dożylny
- Linia środkowa
- Cięcia chirurgiczne
- Rany szarpane
- Abrazje
- Rany lekko sączące
- Rozdarcia skóry

TELFA Max

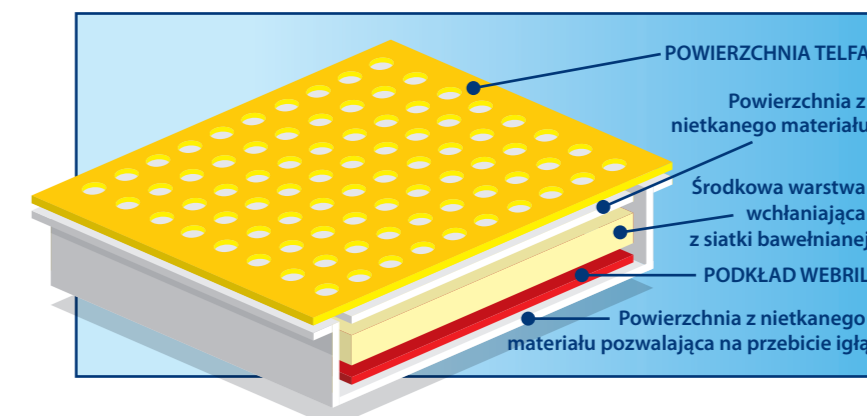

NIEPRZYLEGAJĄCY	Zezwala na wzrost nowej tkanki nie zakłócając procesu gojenia. Umożliwia bezbolesne usunięcie. Nie przywiera do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip).
SUPERCHŁONNA WARSTWA ŚRODKOWA	Idealna do ran mocno sączących, eliminuje potrzebę zastosowania opatrunków kombinowanych. Zmniejsza częstotliwość zmiany opatrunku.
UNIWERSALNY	Dostępny w wielu dogodnych wielkościach. Można go stosować w przypadku różnych rodzajów ran – używany do kompresoterapii.

VIASORB Pokładka

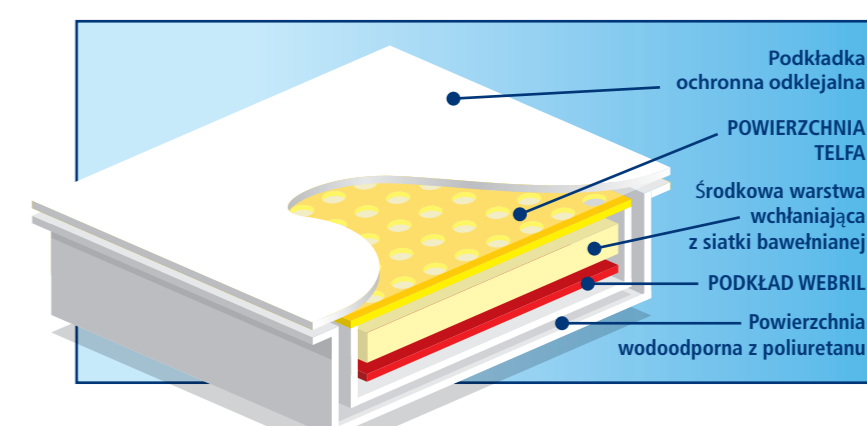

NIEPRZYLEGAJĄCY	Zezwala na wzrost nowej tkanki nie zakłócając procesu gojenia. Umożliwia bezbolesne usunięcie. Nie przywiera do szwów, zszywek lub samoprzylepnych pasków do zamykania ran (steri-strip).
WARSTWA CHŁONNA	Bawełniana warstwa środkowa umożliwia umiarkowane wchłanianie nadmiaru cieczy z miejsca rany
POWIERZCHNIA WODOODPORNĄ	Można nosić w trakcie brania prysznicy bez potrzeby zmiany opatrunku.
KRAWĘDŹ PRZYLEPNA	Niema potrzeby stosowania dodatkowych opatrunków do przymocowania. Oszczędza czas pielęgniarcom
UNIWERSALNY	Dostępny w wielu dogodnych wielkościach. Można go stosować w przypadku różnych rodzajów ran.



ZASTOSOWANIE

- Rany z umiarkowanym lub dużym wysiękiem
- Oparzenia
- Owrodzenia nóg
- Przeszczepy skóry
- Miejsca pobierania
- Abrazje
- Cięcia chirurgiczne
- Chirurgia rekonstrukcyjna



ZASTOSOWANIE

- Rany z niewielkim lub umiarkowanym wysiękiem
- Cięcia chirurgiczne
- Rany szarpane
- Miejsca dostępu naczyniowego
- Owrodzenia
- Abrazje
- Pęknięcia skóry